


PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CHO MÁY DIGITAL MICROSCOPE			
CHECKSHEET: 000-5-CS-1141	Version: 1	Pages: 1/4	

**1. PHẠM VI ÁP DỤNG /APPLICATION:**

Dùng để ghi check sheet bảo trì cho máy Digital microscope (Only PTE)

**2. TÀI LIỆU THAM KHẢO /REFERENCE**

000-5-CS-0845: PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA HÀNG NGÀY DIGITAL MICROSCOPE VH-5500

**3. NỘI DUNG/CONTENT**

[illegible]

- Đánh **O** vào mục thực hiện. Đánh **X** vào mục kiểm tra không đạt.  
Đánh giá **G/NG**: Khoanh tròn vào **G** nếu tất cả các mục thực hiện đều đạt yêu cầu. Ngược lại khoanh tròn **NG** nếu các mục thực hiện có mục không đạt. Đánh dấu (/) vào mục, ngày không thực hiện.  
- Phải tắt nguồn máy trước khi thực hiện công tác bảo trì.








## PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY DIGITAL MICROSCOPE

CHECKSHEET: 000-5-CS-1141

Version: 1

Pages: 3/5

## HƯỚNG DẪN CÁC MỤC THỰC HIỆN BẢO TRÌ

Mục (6) Kiểm tra quạt hút, các nút điều khiển hư hỏng trước khi bảo trì		Mục (7) Dùng giấy tẩy cồn để vệ sinh vỏ máy, màn hình hiển thị	
<p>Máy VH-5500</p>  <p><b>Nút nguồn</b></p> <p>Máy VHX-2000</p> 	<p>Trước khi lấy máy xuống bảo trì cần kiểm tra ngoại quan của máy, kiểm tra quạt, các nút điều khiển và thay thế nếu bị hư</p>	<p>Máy VH-5500</p>  <p>Máy VHX-2000</p>  <p>-Giấy tẩy cồn để vệ sinh: bên ngoài vỏ máy, màn hình hiển thị</p>	
Mục (8) Dùng tấm bông tẩy nước lau kiếng để lau thấu kính		Mục (9) Kiểm tra cơ cấu vận điều chỉnh lên xuống	
	<p>Dùng tấm bông tẩy nước lau kiếng để lau thấu kính. Chú ý lau theo hình xoắn ốc, không lau theo hình zig zag.</p>	<p>Máy VH-5500</p>  <p>Máy VHX-2000</p>  <p>-Xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, Camera di chuyển lên xuống =&gt; Đạt</p>	

## PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY DIGITAL MICROSCOPE

CHECKSHEET: 000-5-CS-1141

Version: 1

Pages: 4/5

Mục (10) Kiểm tra camera và vòng xoay chỉnh độ phóng đại

Máy VH-5500



- Camera không bị biến dạng, nứt, bể => Đạt
- Xoay vòng sang trái, phải để thay đổi độ phóng đại lớn nhỏ => Đạt

Máy VHX-2000




Mục (11) Kiểm tra đánh giá mẫu sau khi bảo trì

Máy VH-5500



Kiểm tra đánh giá mẫu sau khi bảo trì, đánh giá theo tiêu chuẩn của sản phẩm tại chuyên

Máy VHX-2000

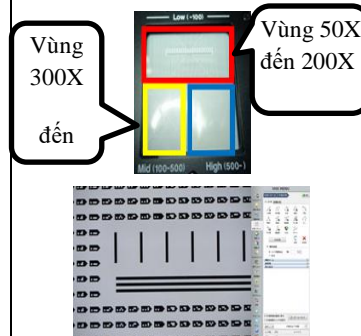

## PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY DIGITAL MICROSCOPE

CHECKSHEET: 000-5-CS-1141

Version: 1

Pages: 5/5

## Revision history

Date	P.I.C	Version	Description		Reason of change	Change requester
			Old content	New content		
30-Sep-2024	10590-Tuan HT	01		New issue	New issue	HiepVV